

La investigación es la cura

Eurofarm Spa

Zona Industriale Piano Tavola 95032 Belpasso (CT) Italy

eurofarm-spa.com

igor.pinieri@eurofarm-spa.com

marketing@eurofarm-spa.com

phone: +39 095391346

fax: +39 095391507





Somos una empresa para farmacéutica especializada en investigación,

producción y distribución de una amplia gama de apósitos estériles, quirúrgicos y dispositivos médicos para el tratamiento de heridas crónicas, así como productos semi-elaborados. Creamos una completa gama de apósitos, vendajes y productos para el cuidado avanzado de heridas, fabricados con materia prima seleccionada y diseñados de acuerdo con la normativa vigente.


Por 30 años, hemos sido una de las pocas empresas de producción en Italia en este ramo.

Experiencia y conocimiento, combinado con un sistema de fabricación flexible, es nuestro valor agregado para ser competitivos y dar respuestas eficaces e innovadoras para el tratamiento de las lesiones de piel y heridas crónicas, para de esta manera lograr un alto nivel de satisfacción del paciente. Nuestra meta se basa principalmente en el crecimiento orgánico de nuestras marcas actuales, en fomentar la creatividad y la agilidad de nuestros colaboradores para expandirnos a mercados nuevos en crecimiento, reforzar nuestra presencia en mercados ganados y desarrollar nuestra red de canales de distribución.

La compañía cubre un área de 32.000 m²,

de los cuales 13.000 m² son utilizados por oficinas, almacenes y entornos de microclima controlado. Un moderno salón de limpieza ISO 8 de casi 800 m², dos líneas de revestimiento, un laboratorio de control de calidad con tecnología avanzada, una planta sofisticada de esterilización de óxido de etileno, aseguran la completa integración del ciclo de producción con las materias primas hacia el producto final estéril.

La empresa está certificada según regulaciones UNI EN ISO 9001:2015 y UNI EN ISO 13485:2016.

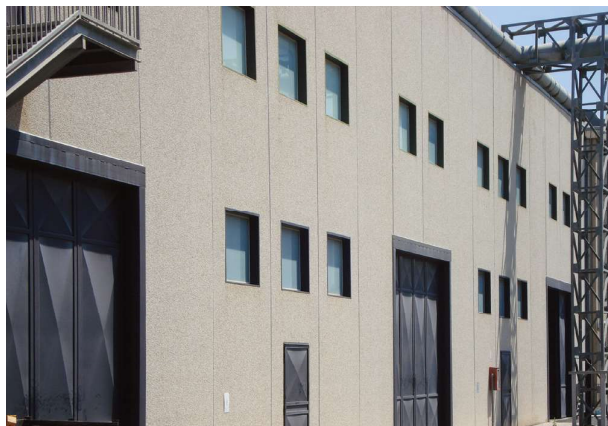

Eurofarm en todo el mundo

Austria

Bélgica

Bosnia - Herzegovina

Bulgaria

República Checa

Chipre

Congo

Egipto

Francia

Alemania

Grecia

India

Indonesia

Irán

Irlanda

Libano

Japón

Kuwait

Madagascar

Malta

México

Países Bajos

Nueva Zelanda

Pakistán

Polonia

Portugal

Rumania

Arabia Saudita

Serbia

Eslovenia

Sudáfrica

España

Turquía

Uganda

Emiratos

Árabes Unidos

Estados

Unidos

Vietnam

Venezuela



Empresa certificada
UNI EN ISO 9001:2015 / UNI EN ISO 13485:2016





Aerosol detergente

a base de cloruro de plata y aloe vera

Vulnomed pag 5



Apósitos

Euromed pag 7


nuevo Euroderm pag 8

Euroderm plus pag 9

Eurometal pag 9

Eurodressing metal pag 10

Eurodressing pag 10

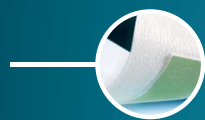

Apósitos a la medida

Longfix aloe pag 12

Longfix pag 12



Apósitos (curitas - heridas menores, primeros auxilios)

Eurostrips aloe pag 14

nuevo Eurostrips emo-stop pag 15

Eurostrips pag 15

Adhesivos

Euroreel white pag 16

Euroreel skin pag 16

Europor pag 16

Eurosilk pag 16

Eurotrasp pag 17

Sujetadores, apósito de fijación

nuevo Enterafix pag 17

Eurofix pag 18

Euroderm roll pag 18



Apósitos oculares

Europtical oclusivo pag 20

Europtical non oclusivo pag 20



Suturas cutáneas

Eurosuture pag 22



Apósitos para traqueostomía

Tracheopad pag 24



Productos para cuidado avanzado de heridas

nuevo Euronet paraffin pag 26

Hydromed pag 27

Hydromed gel pag 28

Silvermed pag 29

Silvermed sb pag 29

Eurosorb pag 30

Eurosorb roll pag 31

Eurocell hydro pag 32

Eurocell hydro roll pag 33

Euroderm foam pag 34

Euroderm foam plus pag 35

Euroderm foam heel pag 36


Euroderm foam tracheo pag 37

Euroderm foam plus concave pag 38

Euroderm foam plus sacral pag 39

nuevo Euroderm foam silicone pag 40

nuevo Euroderm foam cavity pag 41

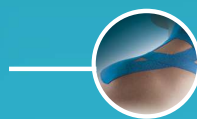

Línea deportiva

nuevo Euroathletic KLS pag 43

nuevo Euroathletic sport tape pag 44

Eurosave pag 45



Vendajes

Eurelasto L pag 47

Eurelasto pag 48

Eurelasto F pag 48

Eurozinc pag 49

Eurozinc elast pag 49

nuevo Eurozinc alginato pag 50

nuevo Eurozinc bielast pag 50

Flebimed short pag 51

Flebimed media pag 51

Flebimed forte pag 52

Flebimed bielast pag 52

Eurobandage pag 53

Eurocollar pag 53





Antes de cualquier apósito... vulnomed

VULNOMED es un aerosol de solución salina isotónica estéril, basado en sales de plata y Aloe Vera para la limpieza, irrigación e hidratación de la piel. Está indicado en heridas agudas y crónicas, lesiones dermatológicas de etiología variada, superficies de piel intacta o lesionada. Permite una limpieza completa y profunda de la piel dañada y del área circundante.

Puede ser útil en el desbridamiento del tejido necrótico.



Las sales de plata evitan la contaminación microbiana de la herida y mantienen el ambiente libre de bacterias exógenas.



El Aloe Vera es conocido por sus propiedades de sanación, restauración y antisépticas.



VULNOMED®

Aerosol de limpieza indicado para todas las heridas, úlceras, quemaduras y erupciones cutáneas.

VULNOMED es una solución salina isotónica estéril de sales de plata y Aloe Vera indicada para limpiar, hidratar e irrigar la piel.



nº. artículo tamaño contenido empaque código de barra

501815

aerosol 125 ml

1 pcs.

12





Apósitos

Euromed

Euroderm

Euroderm plus

Eurometal

Eurodressing metal

Eurodressing

Apósitos

Euromed

Apósito postoperatorio adhesivo estéril, transpirable, hecho de tela no tejida, con compresa central absorbente que no se adhiere a la piel gracias a su particular capa no adherente.



Rápida capacidad de absorción vertical



Transpirable



Adaptable, maleable



Libre de látex



nº. artículo tamaño contenido empaque código de barra

nº. artículo	tamaño	contenido	empaque	código de barra
891800	cm 5 x 7	5 pz.	48	8 057681 905546
891801	cm 6 x 9	6 pz.	48	8 057681 904969
891802	cm 10 x 8	6 pz.	48	8 057681 904976
891804	cm 15 x 8	6 pz.	48	8 057681 904990
891805	cm 20 x 10	4 pz.	48	8 057681 905003
717807	cm 10 x 25	50 pz.	1	8 059616 066940
717808	cm 10 x 30	50 pz.	1	8 059616 066957

Características:

- Empacadas individualmente en un envoltorio de apertura rápida y esterilizados con gas de O.E.
- Cubierta suave y transpirable.
- Compresa absorbente y adaptable, recubierta de adhesivo hipoadérgico.

Beneficios:

- **Compresa muy absorbente y no adhesiva**
La capa de poliéster en contacto con la herida permite el paso de la sangre y exudados a la compresa altamente absorbente, manteniendo un excelente ambiente de curación y un mínimo de dolor durante la remoción del apósito.

• Fijación segura

El adhesivo acrílico hipoadérgico es uniformemente distribuido en la superficie del apósito de tela no tejida, proporcionando una adherencia segura del mismo sobre el sitio circundante de la herida.

• Suave y Adaptable

Asegura la comodidad del paciente, y su adaptabilidad a todos los puntos (incluso en las áreas más difíciles) de la herida.

• Comodidad del paciente

La compresa gruesa minimiza el paso de fluidos y ayuda a proteger la herida de trauma.

Indicaciones:

- **Euromed**, apósito adhesivo para heridas, es ideal y adecuado para uso postoperatorio. También son útiles en accidentes y emergencias para cortadas, laceraciones y heridas suturadas.

8 Apósitos



Euroderm nuevo

Apósito adhesivo estéril transparente, hecho de una fina película de poliuretano altamente resistente, estirable, hipoalergénico y radiotransparente. Esto permite el control continuo de la herida sin tener que retirar el apósito. El soporte de poliuretano impermeable de Euroderm permite a los pacientes la oportunidad de tomar duchas y baños regulares. Euroderm puede dejarse en su lugar por más tiempo que otros apósitos. Euroderm es libre de látex.



Actúa como barrera de bacterias y es resistente al agua



Transpirable



Libre de látex



nº. artículo	tamaño	contenido	empaque	código de barra
717507	cm 6 x 7	100 pz.	2	8 059616 066490
717512	cm 10 x 12	50 pz.	2	8 059616 066520

Indicaciones:

- Para la protección del sitio de inserción de catéter venoso y arterial u otros dispositivos percutáneos
- Quemaduras de 1º y 2º grado
- Para proteger la piel con riesgo de decúbito o sitios de enrojecimiento por inmovilización prolongada
- Como fijación secundaria de otros apósitos

Euroderm plus

Apósito postoperatorio adhesivo tipo isla (compresa central) estéril, impermeable, altamente transpirable, crea una barrera contra las bacterias. Consta de una película transparente de poliuretano con una compresa central absorbente y no adherente.

Descripción:

- Apósito transparente de protección, para heridas de secreción ligera o moderada.
- Fabricados de una película de poliuretano a prueba de bacterias, virus y agua, recubierto con una capa de adhesivo hipoalergénico.
- El papel de soporte de la película de poliuretano es cortado ligeramente en un marco exterior y ventana central para fácil aplicación. Esterilizado con gas de óxido de etileno, con una compresa central no adherente.

Beneficios:

- Mantiene el estado de protección de la herida.
- Muy fácil de aplicar.
- Proporciona un ambiente húmedo a la herida para mejorar la cicatrización y disminuir el dolor.
- El paciente puede ducharse sin riesgo.
- El estilo del marco de Poliuretano permite a la herida transpirar y al vapor de agua escapar, protegiendo la piel contra la maceración. El apósito puede dejarse en su lugar hasta por 5 días, reduciendo al mínimo la interacción con la herida o exposición de la misma.

Indicaciones:

- Apósito primario y secundario para el cuidado de heridas de secreción ligera a moderada.
- Fijación de catéteres I.V.
- Cobertura antibacteriana de heridas, resistente al agua.
- Apósito postoperatorio para proteger heridas cerradas limpias.



Bajo exudado



Transpirable



Actúa como barrera contra bacterias y es resistente al agua



Probada dermatológicamente



Libre de látex

nº. artículo tamaño contenido empaque código de barra

897600	cm 5 x 7	5 pz.	48	8 057681 908400
897602	cm 6 x 9	5 pz.	24	8 057681 908424
897603	cm 10 x 10	5 pz.	24	8 057681 908431
897605	cm 15 x 8	5 pz.	24	8 057681 908455
897607	cm 10 x 25	3 pz.	24	8 057681 908479

Eurometal

Apósito postoperatorio adhesivo tipo isla (compresa central) aluminizada y absorbente, no adherente, la misma actúa como barrera mecánica antibacteriana. La compresa central facilita una rápida cicatrización.

nº. artículo tamaño contenido empaque código de barra

891901	cm 12 x 7	6 pz.	12	8 057681 905034
891902	cm 15 x 8	6 pz.	12	8 057681 905041



Rápida capacidad de absorción vertical



Libre de látex



Transpirable




Promueve la curación



Adaptable y maleable



Probada dermatológicamente

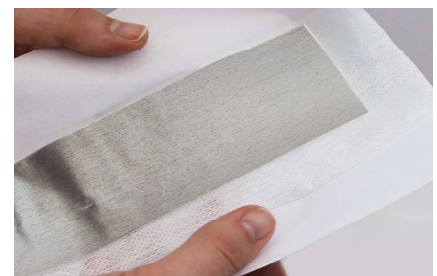



Eurodressing metal

Apósito estéril, no adherente y absorbente, con superficie de aluminio que promueve una curación más rápida. Está indicado para heridas superficiales en el tratamiento postoperatorio; primeros auxilios (abrasiones, cortes); ulceraciones de exudación ligera a moderada; quemaduras menores; y heridas bajo compresión.


nº. artículo tamaño contenido empaque código de barra

892113

cm 10 x 10

6 pz.

12

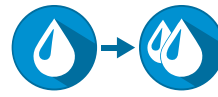

Poco
exudado

Moderado
exudado



Promueve
la curación



Transpirable



Libre de látex



Eurodressing

Apósito estéril absorbente no adherente, indicado para heridas superficiales; para tratamiento postoperatorio; primeros auxilios (abrasiones, cortes); ulceraciones de exudación ligera a moderada; quemaduras menores; y heridas bajo compresión.


nº. artículo tamaño contenido empaque código de barra

892103

cm 10 x 10

6 pz.

12

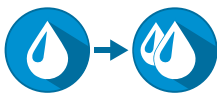

Exudado
ligero

Exudado
moderado



Hipoalergénico




Transpirable




Libre de látex



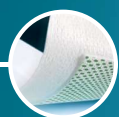

Apósito de longitud continua (apósitos a la medida)

Longfix aloe
Longfix

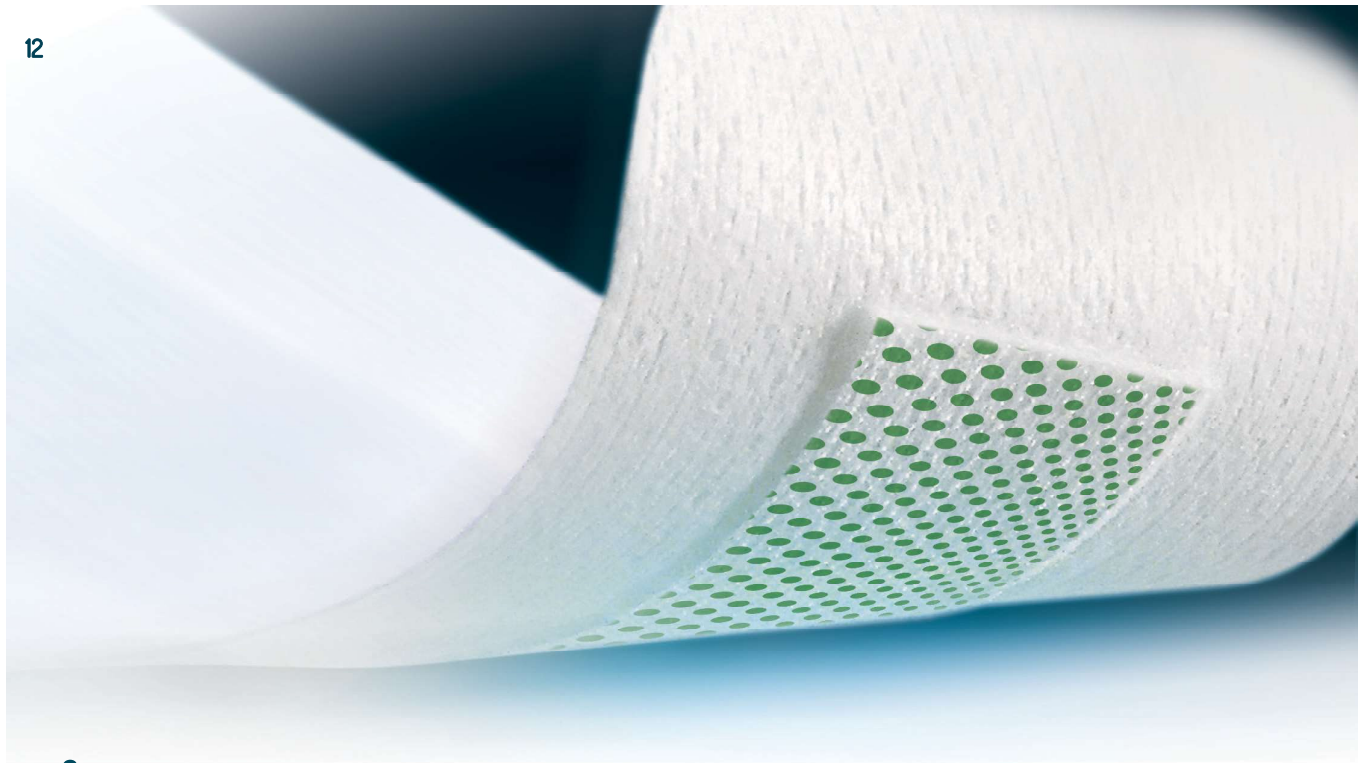

Apósitos de longitud continua

Longfix aloe



Apósito de longitud continua adhesiva, con una compresa absorbente central de Aloe Vera, apto para pieles sensibles. El apósito se puede cortar en el tamaño requerido. Cualquier herida menor necesita un apósito adecuado para ayudar a la cicatrización. La tecnología de compresa de Aloe Vera promueve la curación y es capaz de realizar una acción epitelizadora y antiséptica excepcional.

nº. artículo	tamaño	contenido	empaque	código de barra
861002	m 0,5 x cm 6	1 pz.	48	8 057681 909476
861003	m 0,5 x cm 8	1 pz.	48	8 057681 909483
861005	m 1 x cm 6	1 pz.	48	8 057681 909506
861006	m 1 x cm 8	1 pz.	48	8 057681 909513

Longfix



Apósito adhesivo de tela no tejida blanca y longitud continua, con una compresa central no adherente y absorbente. No irrita la piel y es altamente transpirable. El apósito se puede cortar en el tamaño requerido. Adecuado para heridas leves y raspaduras en general.

nº. artículo	tamaño	contenido	empaque	código de barra
740002	m 0,5 x cm 6	1 pz.	24	8 057681 01364
740003	m 0,5 x cm 8	1 pz.	24	8 057681 901371
740005	m 1 x cm 6	1 pz.	24	8 057681 901395
740006	m 1 x cm 8	1 pz.	24	8 057681 901401

Libre de látex



Bajo exudado



Promueve la cicatrización





Apósitos

(curitas - heridas menores, primeros auxilios)

Eurostrips aloe
Eurostrips emo-stop
Eurostrips

Adhesivos

Euroreel white
Euroreel skin
Europor
Eurosilk
Eurotrasp

Sujetadores, apósito de fijación

Enterafix
Eurofix
Euroderm roll



Apósitos (curitas - heridas menores, primeros auxilios)

Eurostrips aloe



Con Aloe Vera



Antiséptico



Promueve la curación

Apósito adhesivo (curita) de polietileno con una compresa absorbente central de Aloe Vera. Adecuado para pieles sensibles. Cualquier herida menor necesita un apósito adecuado para ayudar a la sanación.

La tecnología de la compresa de Aloe Vera promueve la curación y es capaz de realizar una acción antiséptica y epitelizadora excepcional. Está indicado para primeros auxilios; para la curación de pequeñas heridas en los dedos u otras partes del cuerpo.

n.º artículo tamaño contenido empaque código de barra

n.º artículo	tamaño	contenido	empaque	código de barra
826051	medium	20 pz.	72	8 057681 909407
826056	medium/large	20 pz.	72	8 057681 909773
826055	assorted	20 pz.	72	8 057681 909766



nuevo

Eurostrips emo-stop



Apósitos (curitas) de presión hemostática, con compresa central compuesta de fibras súper absorbentes que aumentan su volumen inmediatamente después de la absorción de sangre, por lo tanto, efectúan una acción compresiva sobre la herida con un rápido control de la hemorragia. Eurostrips emo-stop es flexible, hipoadérgico, elástico y transpirable.

n.º artículo tamaño contenido empaque código de barra

826283	mm 31x72	12 pz.	72	8 057018 290710
--------	----------	--------	----	-----------------

Hemostático

Libre de látex

Hipoalérgico

Transpirable

Elástico

Eurostrips

Apósitos (curitas) de polietileno estéril, transpirable resistente al agua. El soporte elástico provee óptima adaptabilidad.

n.º artículo tamaño contenido empaque código de barra

Libre de látex

Transpirable

Elástico

Hipoalérgico

826002	Mediano	24 pz.	72	8 057681 903658
826003	Mediano/grande	20 pz.	72	8 057681 905553
826021	Variado	20 pz.	72	8 057681 905560



Euroreel white

Cinta adhesiva de algodón blanca



Libre de látex

Cinta quirúrgica adhesiva 100% de algodón blanco, cubierta con masa adhesiva de óxido de zinc en líneas micrométricamente espaciadas. Es permeable al aire, altamente hipoalergénica y no irrita la piel. Adecuado para la fijación de dispositivos médicos.

nº. artículo	tamaño	contenido	empaque	código de barra
801011	m 5 x cm 1,25	1 pz.	36	8 057681 903047
801012	m 5 x cm 2,5	1 pz.	24	8 057681 903054
801015	m 5 x cm 5	1 pz.	12	8 057681 903061
801020	m 5 x cm 10	1 pz.	6	8 057681 903085

Euroreel skin

Cinta adhesiva de algodón color piel



Libre de látex

Cinta quirúrgica adhesiva 100% de algodón color piel, cubierta con masa adhesiva de óxido de zinc en líneas micrométricamente espaciadas. Es permeable al aire, altamente hipoalergénica y no irrita la piel. Adecuada para la fijación de dispositivos médicos.

nº. artículo	tamaño	contenido	empaque	código de barra
802011	m 5 x cm 1,25	1 pz.	36	8 057681 903122
802012	m 5 x cm 2,5	1 pz.	24	8 057681 903139
802015	m 5 x cm 5	1 pz.	12	8 057681 903146

Europor

Cinta quirúrgica adhesiva micro poroso



Libre de látex

Para piel delicada

Cinta quirúrgica adhesiva micro poroso, transpirable, radio transparente hipoalergénica. Adecuada para la fijación de dispositivos médicos.

nº. artículo	tamaño	contenido	empaque	código de barra
807001	m 5 x cm 1,25	1 pz.	36	8 057681 903290
807002	m 5 x cm 2,5	1 pz.	24	8 057681 903306
807005	m 5 x cm 5	1 pz.	12	8 057681 903313

Eurosilk

Cinta adhesiva de apariencia sedosa



Libre de látex

Para piel delicada

Cinta adhesiva quirúrgica de apariencia sedosa de 100% acetato, transpirable, fuerte y no elástica, hipoalergénica, fácil de rasgar en ambos sentidos con las manos, especialmente adecuada para pieles sensibles.

nº. artículo	tamaño	contenido	empaque	código de barra
809001	m 5 x cm 1,25	1 pz.	36	8 057681 903399
809002	m 5 x cm 2,5	1 pz.	24	8 057681 903405
809005	m 5 x cm 5	1 pz.	12	8 057681 903412

Eurotrasp Cinta adhesiva transparente de polietileno.

Cinta adhesiva porosa transparente de polietileno. Es rápida y fácil de rasgar (incluso usando guantes quirúrgicos) en forma transversal y longitudinal, así como por el medio. Permeable al aire y al vapor de agua, pero impermeable a los líquidos.



Libre de látex

nº. artículo	tamaño	contenido	empaque	código de barra
812101	m 5 x cm 1,25	1 pz.	36	8 057681 909186
812102	m 5 x cm 2,5	1 pz.	24	8 057681 909193
812105	m 5 x cm 5	1 pz.	12	8 057681 909209

Apósito de fijación, sujetadores

nuevo

Enteralfix


Sujetador nasogástrico



Sujetador adhesivo de poliéster no tejido y elástico, para fijación de tubos gástricos nasales, alimentación enteral. La alta elasticidad permite la fácil aplicación, adaptabilidad y maleabilidad.

Enteralfix tiene excelentes propiedades de adherencia, resultando en una larga durabilidad sin causar dolor en la remoción, incluso en la piel más delicada. No deja residuo alguno después de la remoción. No irrita la piel.

nº. artículo	tamaño	contenido	empaque	código de barra
724551	cm 6,2 x 5	100 pz.	2	8 057018 290635

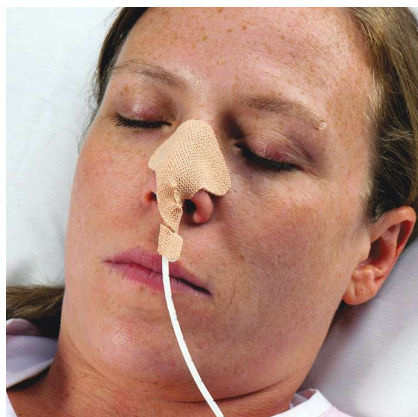

Hipoalérgico



Libre de látex



Para piel delicada

Eurofix



Apósito adhesivo de fijación o secundario no tejido, en malla de poliéster y en rollo. Es muy suave, no irrita la piel y es altamente hipoalérgico. Permite un ajuste cómodo del apósito a la piel y a otras partes particularmente irregulares del cuerpo. El adhesivo no se debilita por agua ni por secreciones. El papel impreso a cuadros azules pre-cortado protege el lado adhesivo. Diseñado para una fácil fijación de apósitos primarios.

n.º. artículo tamaño contenido empaque código de barra

n.º. artículo	tamaño	contenido	empaque	código de barra
891702	m 5 x cm 5	1 pz.	24	8 057681 904938
891704	m 10 x cm 5	1 pz.	12	8 057018 291274
891705	m 10 x cm 10	1 pz.	12	8 057018 291267
891706	m 10 x cm 15	1 pz.	12	8 057018 291250
715004	m 10 x cm 20	1 pz.	12	8 059616 065608
715006	m 10 x cm 30	1 pz.	12	8 059616 065622

Transpirable



Adaptable y maleable



Para piel delicada



Libre de látex



Euroderm roll



Apósito adhesivo de poliuretano en rollo para fijación o para uso como apósito secundario, es transparente, impermeable, altamente transpirable y flexible, se adapta a partes irregulares del cuerpo, también fácil de cortar en cualquier tamaño requerido.

Diseñado para una fácil fijación de apósitos primarios, y permite la transpiración de la piel. Resistente al agua. Ofrece al paciente la oportunidad de realizar la higiene diaria y actividades normales. El soporte transparente permite la monitorización continua de la herida, limitando la necesidad de cambio de apósito.

n.º. artículo tamaño contenido empaque código de barra

n.º. artículo	tamaño	contenido	empaque	código de barra
715601	m 10 x cm 5	1 pz.	12	8 059616 065936
715602	m 10 x cm 10	1 pz.	12	8 059616 065943
715603	m 10 x cm 15	1 pz.	12	8 059616 065950

Transpirable



Adaptable y maleable



Libre de látex





Apósitos oculares

Europtical oclusivo

Europtical non oclusivo



Apósitos oculares

Euoptical oclusivo

Apósito ocular estéril listo para usarse, con compresa oclusiva. Ideal para la corrección de estrabismo, para la profilaxis y tratamiento de la ambliopía. El material altamente poroso de tela no tejida conserva las funciones fisiológicas de la piel y reduce el riesgo de maceración. Además, la alta permeabilidad al aire y al vapor de agua evita la congestión del calor en la cavidad del ojo. Su forma

anatómica permite una fácil y precisa aplicación, incluso cuando es usado debajo de lentes.



Libre de látex



Listo para usarse



n°. artículo	tamaño	contenido	empaque	código de barra
892300	cm 5,2 x 6,4	6 pz.	24	8 057681 908295
892301	cm 5,7 x 8,2	7 pz.	24	8 057681 905317
717200	cm 5,2 x 6,4	50 pz.	1	8 059616 066254

Euoptical non oclusivo

Apósito ocular estéril con una compresa blanca absorbente no oclusiva. Es ideal para la protección postoperatoria del ojo. El material altamente poroso de tela no tejida del soporte, conserva las funciones fisiológicas de la piel y reduce el riesgo de maceración. Además, la alta permeabilidad al aire y al vapor de agua evita la congestión del calor en la cavidad del ojo. Su forma anatómica permite la aplicación fácil y precisa, incluso cuando se usan debajo de lentes.



n°. artículo	tamaño	contenido	empaque	código de barra
892351	cm 5,2 x 6,4	6 pz.	24	8 057681 908301
892352	cm 5,7 x 8,2	6 pz.	24	8 057681 905577
717210	cm 5,2 x 6,4	50 pz.	1	8 059616 066285



Tiras para sutura

(Sutura cutánea)

Eurosuture

Tiras para sutura (Sutura cutánea)

Eurosuture



Las tiras estériles de sutura cutánea proporcionan una máxima adherencia dinámica y una seguridad superior a la herida. Están hechas de tela no tejida porosa de poliamida, con adhesivo sensible a la presión. Los materiales patentados permiten a Eurosuture tener un perfecto equilibrio entre elasticidad y adherencia, imitando de cerca el modo de la elasticidad de la piel humana. Eurosuture son fáciles de aplicar. Sus extremos redondeados, únicos, resisten el enrizado y la remoción prematura.

n.º artículo tamaño contenido empaque código de barra

n.º artículo	tamaño	contenido	empaque	código de barra
817410	mm 3 x 75	10 pz.	24	8 057681 908646
817420	mm 6 x 38	12 pz.	24	8 057681 908653
817430	mm 6 x 75	6 pz.	24	8 057681 908660
817450	mm 13 x 100	12 pz.	24	8 057681 908684

Beneficios:

- Transpirable, poroso. El soporte elástico puede ser utilizado en áreas difíciles del cuerpo o donde se producen la flexión y el movimiento.
- Su color brinda un aspecto estéticamente agradable.
- Elimina marcas de puntura con un mejor resultado cosmético que las suturas o grapas.

- Rápido y fácil de aplicar para ahorrar tiempo.
- Adhesivo hipoalergénico.
- Disponible en una variedad de tamaños para satisfacer sus necesidades.
- Los bordes redondeados ayudan a prevenir enrizado.
- Disponible en empaque sellado y esterilizado con O.E.

Usos:

- Para uso en las zonas altamente contorneadas del cuerpo o de movimientos musculo-esqueléticos, como las articulaciones.
- Proporciona apoyo después de la eliminación precoz de sutura o de grapas.
- Útil como soporte de heridas postoperatorias y después de retirar la sutura.

Para su uso en:

- Salas de emergencia.
- Salas de operaciones.
- Clínicas y consultorios médicos.



Libre de látex



Hipoalergénico




Dermatológicamente probados





Apósito de traqueostomía

Tracheopad

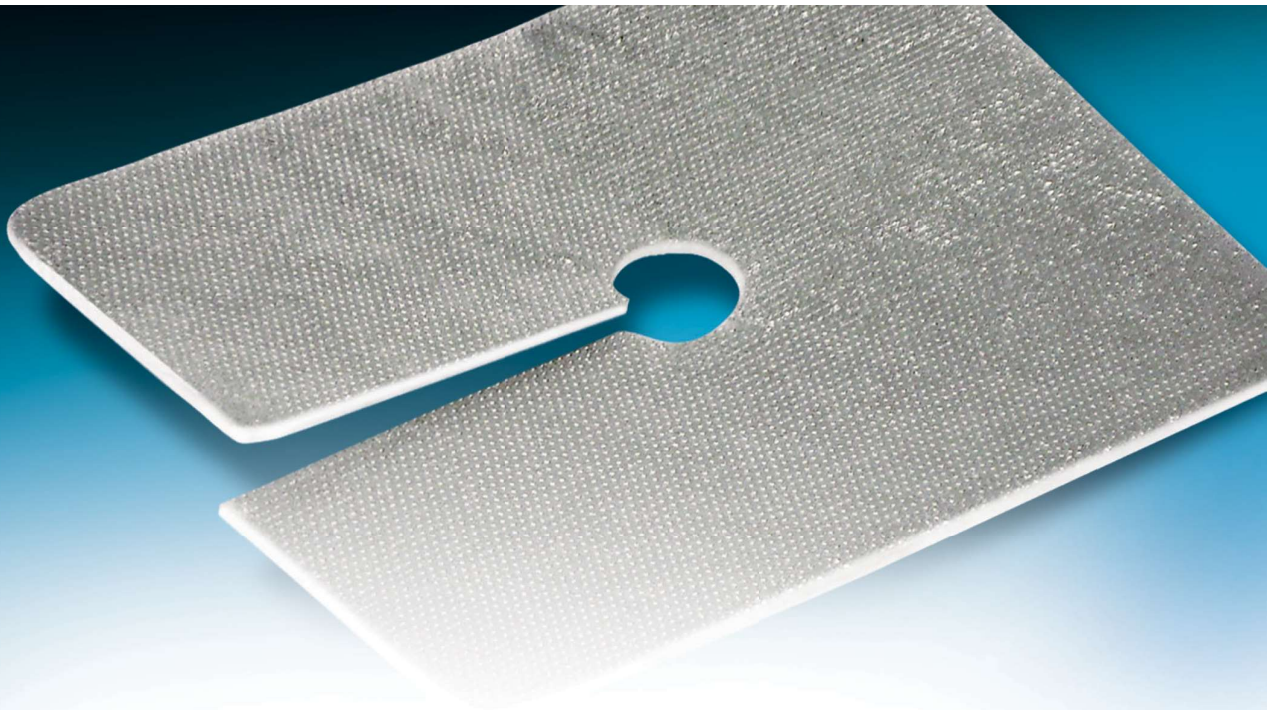


Apósito de traqueostomía

Tracheopad

Apósito aluminizado estéril, no adherente y absorbente, especialmente diseñado para su uso en traqueostomías, nefrostomías y drenajes de gran calibre. La excelente calidad de la capa aluminizada que entra en contacto con la herida, reduce la adherencia del apósito a la piel y al tubo de traqueostomía, minimizando el trauma para el paciente durante la extracción. Además, la alta porosidad de esta capa permite la buena transpiración de la piel, una rápida absorción de la sangre y exudado en el apósito y, por lo tanto, mantiene la superficie de la herida seca. Tracheopad actúa como una barrera confiable contra la contaminación de bacterias.



Actúa como barrera de bacterias y es resistente al agua

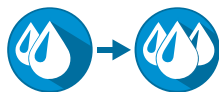

Exudado moderado

Exudado intenso

nº. artículo tamaño contenido empaque código de barra

717320

cm 8 x 9,3

50 pz.

2



8 057681 908110



Cuidado avanzado de heridas

Euronet paraffin

Hydromed

Hydromed gel

Silvermed

Silvermed sb

Eurosorb

Eurosorb roll

Eurocell hydro

Eurocell hydro roll

Euroderm foam

Euroderm foam plus

Euroderm foam heel

Euroderm foam tracheo

Euroderm foam plus concave

Euroderm foam plus sacral

Euroderm foam silicone

Euroderm foam cavity

Cuidado avanzado de heridas

Euronet paraffin

nuevo

Euronet Paraffin es una gasa 100% hilo de algodón absorbente, impregnada con ungüento de parafina blanda y blanca. Lo hace un apósito no adherente y no alergénico. Euronet paraffin se utiliza como capa de contacto primaria de la herida en el tratamiento de quemaduras, úlceras, injertos de piel y una variedad de lesiones traumáticas. El material también se utiliza como un medio de transferencia para la piel durante injertos. Euronet paraffin es libre de látex.



Exudado moderado



Exudado intenso



Libre de látex

nº. artículo tamaño contenido empaque código de barra

560001 cm 5 x 5 10 pz. 10

8



057018 290260

560110 cm 10 x 10 10 pz. 10

8



057018 290338

560020 cm 20 x 7,5 10 pz. 10

8



057018 290321


Indicaciones:

- Euronet Paraffin se utiliza como una capa primaria de contacto con la herida en el tratamiento de quemaduras, úlceras, injertos de piel y una variedad de lesiones traumáticas. El material también se utiliza como medio de transferencia para la piel durante injertos.

- Bajo la supervisión profesional de un médico, Euronet paraffin puede ser utilizado para el manejo de heridas infectadas o en las mismas donde hay un mayor riesgo de infección.


Contraindicaciones:

- Aunque no hay contraindicaciones para el uso de Euronet paraffin, si el apósito se coloca sobre una herida muy exudativa, su naturaleza semi-oclusiva puede causar maceración de tejido, impidiendo la libre circulación del exudado de la superficie de la herida.

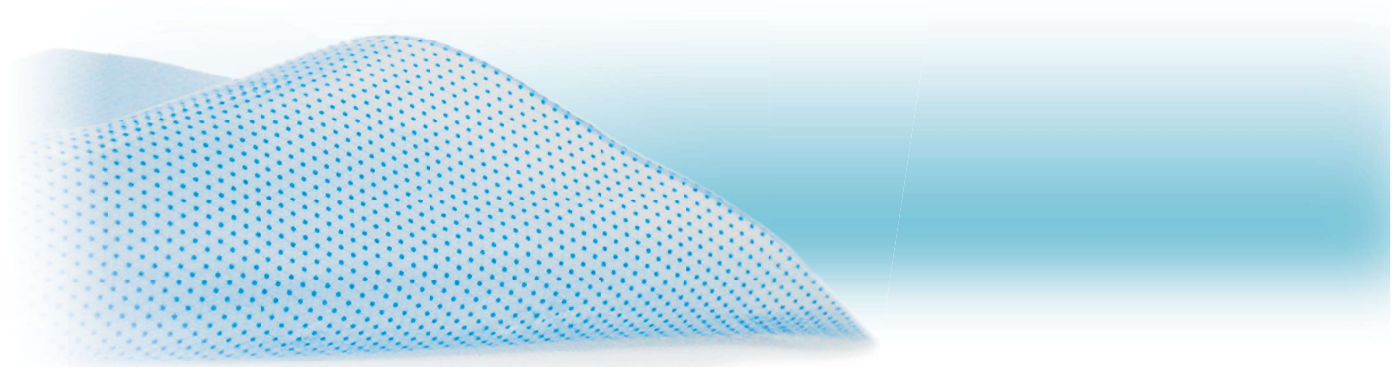

Hydromed

Apósito de hidrogel diseñado para gestionar la actividad del dolor, la humedad y la proteasa en heridas de bajo exudado, ya que absorbe rápida y localmente. Esto reduce el riesgo de maceración de la herida. Adecuado para quemaduras de 1° y 2° grado, abrasiones, dermoabrasiones, radiodermatitis, heridas tórpidas y úlceras fibrinosas o de base necrótica. Refrescante.

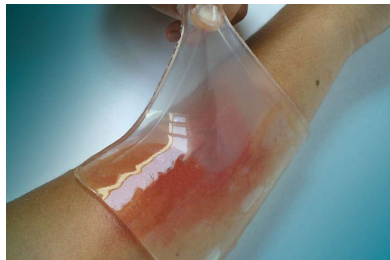

Exudado ligero Exudado moderado



Refrescante



No libera olores desagradables



Libre de látex

nº. artículo	tamaño	contenido	empaque	código de barra
892011	cm 6,5 x 5	5 pz.	10	8 057681 905065
892013	cm 10 x 10	5 pz.	10	8 057681 905072
892015	cm 15 x 15	5 pz.	10	8 057681 905089
892017	cm 20 x 20	5 pz.	10	8 057681 905096



A diferencia de la típica hoja de hidrogel, HYDROMED absorbe rápida y localmente. Esto reduce el riesgo de maceración de la herida.

Indicaciones:

- Adecuado para el tratamiento de heridas crónicas y de lenta curación, en fase de granulación y de epitelización.
- Debido a una estructura tridimensional y de alto contenido de agua, HYDROMED es adecuado para el uso en desbridamiento y para quemaduras de segundo grado.

Contraindicaciones:

- Hydromed no debe utilizarse en heridas infectadas ni quemaduras de tercer grado. Además, no debe ser utilizado en heridas altamente exudativas ni en músculos, huesos y tendones expuestos.

Hydromed gel

Gel amorfo estéril transparente, adecuado para la eliminación de tejido necrótico. El gel crea un ambiente de la herida húmedo, impidiendo la formación de escara y fomentando la curación. Al mantener el frágil tejido de granulación húmedo, ayuda a crear un entorno de curación de la herida que permite la migración de células epitelizantes.



Exudado ligero



Hidratante



Libre de látex

nº. artículo tamaño contenido empaque código de barra

501705

Tubo 15 gr

1 pz.

10



Características:

- **Acción Desbridadora:** HYDROMED Gel re-hidrata el tejido necrótico y ayuda el desbridamiento.
- **Acción Hidroactiva:** HYDROMED Gel absorbe la piel desecada y el exudado, sin dañar el frágil tejido de granulación.
- **Crea un ambiente húmedo de cicatrización:** HYDROMED Gel ayuda a crear un óptimo ambiente húmedo de gestión de la herida, que promueve la curación, reduce la probabilidad de cicatrización y ayuda a calmar el dolor.
- **Es estable y contrarresta la filtración y la maceración:** La textura viscosa del gel lo hace permanecer en el sitio, incluso después de la absorción de los desechos y el exudado. El gel seguirá siendo cohesivo y contrarrestará la filtración y la maceración.
- **Fácil de quitar:** El gel es fácil de quitar debido a la alta cohesión, incluso después de la absorción de piel desecada y exudado.

Indicaciones:

- HYDROMED Gel está destinado principalmente para el tratamiento de heridas necróticas y con restos, por ejemplo, la pierna diabética no infectada, las úlceras de decúbito y úlceras de pie.
- HYDROMED Gel puede usarse también en quemaduras de 1º y 2º grado.
- El gel puede ser utilizado a lo largo del proceso de curación para proporcionar un ambiente de la herida húmedo en todos los tipos de heridas.

Contraindicaciones:

- Quemaduras de espesor total.

Precauciones y advertencias:

- Se puede utilizar en pacientes con infección local y sistémica, bajo la discreción de un médico.
- En caso de reacciones alérgicas, por favor deje de usar y consulte a su médico directamente.
- Sólo para uso externo.

- No reutilice el producto. Reutilización puede suponer riesgo de infección.
- Si el empaque está roto no utilice ni vuelva a esterilizar el producto.

• Características:

Buenas propiedades de donación.
Alta viscosidad.

• Beneficios:

Desbridamiento autolítico, facilita una cicatrización más rápida.
Minimiza la necesidad de desbridamiento físico.
Fácil de aplicar: permanece in situ.

Silvermed con borde adhesivo

Apósito estéril con compresa central absorbente de iones de plata y no adherente. Gracias a su red de plata metálica micronizada, conserva el microambiente de la herida, estimula el desarrollo de tejido de granulación y actúa como un antibacteriano para las heridas, úlceras, úlceras de decúbito, quemaduras, abrasiones menores y sitios de donantes.



Libre de látex



Bajo exudado



Plata micronizada



Fácil de quitar



Hipoalergénico



n.º artículo	tamaño	contenido	empaque	código de barra
--------------	--------	-----------	---------	-----------------

892063	cm 10 x 10	5 pz.	12	8 057681 905140
--------	------------	-------	----	-----------------

892066	cm 10 x 20	3 pz.	12	8 057681 905157
--------	------------	-------	----	-----------------

Silvermed sb (sin borde adhesivo)

Apósito estéril y absorbente con iones de plata no adherente, sin borde adhesivo. Gracias a su red de plata metálica micronizada, conserva el microambiente de la herida, estimula el desarrollo de tejido de granulación y actúa como antibacteriano para heridas, úlceras, úlceras de decúbito, quemaduras menores, abrasiones y sitios de donantes.



Libre de látex



Bajo exudado



Plata micronizada



Fácil de quitar



Hipoalergénico



n.º artículo	tamaño	contenido	empaque	código de barra
--------------	--------	-----------	---------	-----------------

892073	cm 10 x 10	5 pz.	12	8 057681 905171
--------	------------	-------	----	-----------------

892076	cm 10 x 20	3 pz.	12	8 057681 905188
--------	------------	-------	----	-----------------

Descripción:

- Compresa para herida absorbente antimicrobiana, viscosa y fibras de poliéster, laminadas en red color plata. La capa de tela no tejida contiene iones de plata.
- Silvermed es un apósito primario de la herida. La versión sin bordes (Silvermed sb) debe ser fijado con apósito de fijación secundaria p. ej. Euroderm, Euroderm roll o Eurofix.

Características:

- Barrera antimicrobiana para prevenir colonización en el apósito.
- Profilaxis contra la infección, especialmente para las heridas con alto riesgo de infección.
- Biocompatible y conforme a la ISO 10993.

Indicaciones:

- Heridas infectadas, heridas secas o de drenaje mínimo, úlceras por presión de espesor parcial, quemaduras de primero y segundo grado.

Contraindicaciones:

- No hay contraindicaciones absolutas para el uso de Silvermed.
- No use en individuos con sensibilidad conocida a cualquiera de los componentes de la preparación.
- Debido a la presencia de iones de plata antimicrobianos, la experiencia con recién nacidos/neonatos es limitada.



Eurosorb

Apósito estéril, suave y muy absorbente de fibras 100 % alginato de calcio, altamente integrales. Eurosorb puede absorber exudados hasta 15 veces su peso y puede permanecer in situ hasta por 7 días, dependiendo de la condición del paciente y la cantidad de exudados.

Eurosorb es un alginato altamente integral que absorbe exudados entre y dentro de sus fibras.

La ventaja es que puede retirarse en una sola pieza, y la estructura de Eurosorb reduce al mínimo el riesgo de liberación de fibras de alginato en la herida sin causar trauma al tejido recién formado, no se adhiere a la herida y la liberación de exudados previene la maceración de la piel.


Eurosorb está indicado para el tratamiento de úlceras en las piernas, sitios de donación de piel y úlceras por presión.



Libre de látex



Fácil de quitar

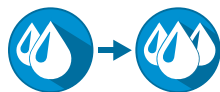

Exudado moderado



Exudado intenso

nº. artículo tamaño contenido empaque código de barra

501505

cm 5 x 5

10 pz.

10



8

059616 060191

501510

cm 10 x 10

10 pz.

10



8

059616 060207

501520

cm 10 x 20

5 pz.

10



8

059616 060221

Indicaciones:

- Úlceras por presión
- Úlceras en las piernas
- Heridas de cavidad
- Sitios donantes de piel

Contraindicaciones:

- Implante quirúrgico
- Quemaduras de tercer grado
- Heridas secas

Características:

- Alta capacidad de absorción
- Alta resistencia húmeda
- Retiene exudado
- Se convierte en un gel que no se pega a la herida
- Mantiene un ambiente húmedo y de curación de la herida.
- Dona calcio a la herida.

Beneficios:

- Dura un tiempo más largo entre cambios de apósitos.
- Eliminación en una sola pieza.
- Residuos mínimos en lecho de la herida.
- Reduce el riesgo de maceración.
- Reduce el trauma durante el cambio de apósito.
- Reduce la necesidad de desbridamiento.
- Óptimas condiciones de curación de la herida.
- Ayuda a detener el sangrado menor.



Eurosorb roll

Apósito de alginato de calcio en rollo de alta integridad, estéril, suave y hecho de fibras de 100% alginato de calcio. Eurosorb puede absorber exudados hasta 15 veces su peso y puede permanecer in situ hasta por 7 días, dependiendo de la condición del paciente y la cantidad de exudados.

Eurosorb es un alginato altamente integral que absorbe exudados entre y dentro de sus fibras. La ventaja es que se puede quitar en una sola pieza y la estructura reduce al mínimo el riesgo de liberación de fibras de alginato en la herida, no causa trauma al tejido recién formado, no se adhiere al lecho de la herida y la liberación de exudados previene la maceración de la piel. Eurosorb roll está indicado para el tratamiento de heridas de cavidad.



Libre de látex



Fácil de quitar



Exudado moderado



Exudado intenso

nº. artículo tamaño contenido empaque código de barra

501630

cm 2,5 x 30

5 pz.

5



8 059616 060238

Indicaciones:

- Úlceras por presión
- Úlceras en las piernas
- Heridas de cavidad
- Sitios donantes de piel

Contraindicaciones:


- Implantes quirúrgicos
- Quemaduras de tercer grado
- Heridas secas

Características:

- Alta capacidad de absorción
- Alta resistencia a la humedad
- Retiene el exudado
- Se convierte en un gel que no se pega a la herida
- Mantiene un ambiente 'Húmedo y de curación de la herida.'
- Dona calcio a la herida.

Beneficios:

- Dura un tiempo más largo entre cambios de apósitos.
- Eliminación en una sola pieza.
- Residuos mínimos en lecho de la herida.
- Reduce el riesgo de maceración.
- Reduce el trauma durante el cambio de apósito.
- Reduce la necesidad de desbridamiento.
- Óptimas condiciones de curación de la herida.
- Ayuda a detener el sangrado menor.

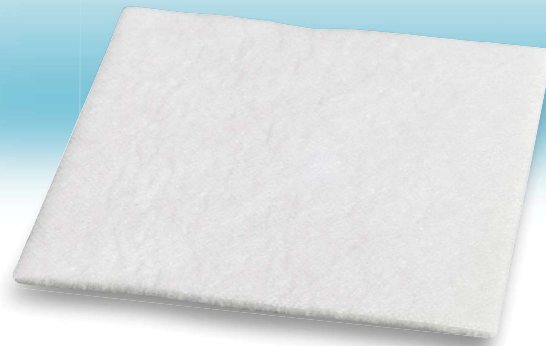


Eurocell hydro

Apósito integral para heridas altamente absorbente, adaptable, maleable y húmedo que incorpora la tecnología super gelificante de carboximetilcelulosa (CMC). En contacto con el exudado de la herida, CMC forma un gel cristalino que ayuda a mantener un ambiente húmedo para apoyar el proceso de cicatrización, y ayuda en la eliminación de tejido no viable de la herida, sin dañar tejido recién formado. El apósito está indicado para el tratamiento de heridas crónicas de moderada exudación a muy exudativas, de espesor parcial y total, también está indicado para heridas agudas, controlando hemorragias leves en heridas superficiales.



Apósito hidroactivo

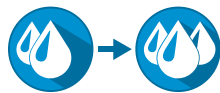

Exudado moderado

Exudado intenso

nº. artículo	tamaño	contenido	empaque	código de barra
895005	cm 5 x 5	10 pz.	10	8 057681 908929
895010	cm 10 x 10	10 pz.	10	8 057681 908936
895012	cm 10 x 20	5 pz.	10	8 057681 908943
895015	cm 15 x 15	5 pz.	10	8 057681 908950

El apósito **EUROCEL HYDRO® CMC** está diseñado para la gestión de heridas crónicas de exudación moderada a fuerte y de espesor parcial o total, también está indicado para heridas agudas. Controla sangrado menor en heridas superficiales.

El apósito EUROCEL HYDRO® CMC puede utilizarse en las siguientes heridas:


- Úlceras en las piernas, úlceras por presión (etapa II-IV) y úlceras diabéticas.
- Heridas de cavidad

- Heridas quirúrgicas.
- Quemaduras de espesor superficial y parcial.
- Heridas traumáticas.
- Absorción de exudado en las heridas de Oncología (p.ej. heridas neoplásicas cutáneas, metástasis cutánea y los sarcomas de Kaposi).

El apósito **EUROCEL HYDRO® CMC** puede dejarse in situ un máximo de 7 días cuando sea clínicamente indicado (excepto en quemaduras donde puede dejarse en su lugar hasta por 14 días).

Pruebas de comparación han demostrado que los apósitos EUROCEL HYDRO® CMC para heridas tienen un excelente desempeño sobre los principales apósitos gelificantes en:

- Absorción, capacidad para absorber altos niveles de exudado durante el uso.
- Retención de líquidos, capacidad de retener exudado bajo compresión.
- Fuerza Húmeda, capacidad de permanecer intacto cuando se retira del lecho de la herida.

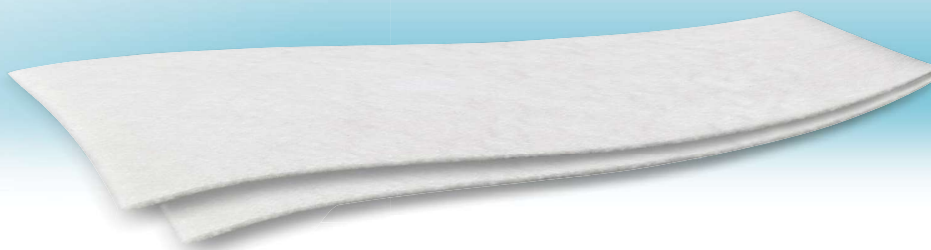

Eurocell hydro roll

Apósito integral para heridas altamente absorbente, adaptable, maleable y húmedo, que incorpora la tecnología super gelificante de carboximetilcelulosa (CMC). En contacto con el exudado de la herida, CMC forma un gel cristalino que ayuda a mantener un ambiente húmedo para apoyar el proceso de cicatrización, y ayuda en la eliminación de tejido no viable de la herida, sin dañar tejido recién formado. El apósito está indicado para el tratamiento de heridas crónicas de moderada exudación a muy exudativas, de espesor parcial o total, y también está indicado para heridas agudas, controlando hemorragias leves en heridas superficiales. Está indicado para heridas agudas de cavidad.



Apósito hidroactivo



Exudado moderado

Exudado intenso



nº. artículo tamaño contenido empaque código de barra

895630

cm 2,5 x 45

5 pz.

10



8 057681 908967

El apósito **EUROCEL HYDRO® CMC** está diseñado para la gestión de heridas crónicas de exudación moderada a fuerte y de espesor parcial o total, también está indicado para heridas agudas, controlando sangrado menor en heridas superficiales.

El apósito EUROCEL HYDRO® CMC puede utilizarse en las siguientes heridas:

- Úlceras en las piernas, úlceras por presión (etapa II-IV) y úlceras diabéticas.
- Heridas de cavidad

- Heridas quirúrgicas.
- Quemaduras de espesor superficial y parcial.
- Heridas traumáticas.
- Absorción de exudado en las heridas de Oncología (p.ej. heridas neoplásicas cutáneas, metástasis cutánea y los sarcomas de Kaposi).

El apósito **EUROCEL HYDRO® CMC** puede dejarse in situ un máximo de 7 días cuando sea clínicamente indicado (excepto en quemaduras donde puede dejarse en su lugar hasta por 14 días).

Pruebas de comparación han demostrado que los apósitos EUROCEL HYDRO® CMC para heridas tienen un excelente desempeño sobre los principales apósitos gelificantes en:

- Absorción, capacidad para absorber altos niveles de exudado durante el uso.
- Retención de líquidos, capacidad de retener exudado bajo compresión.
- Fuerza Húmeda, capacidad de permanecer intacto cuando se retira del lecho de la herida.



Euroderm foam

Euroderm foam es una espuma de poliuretano hidro-celular de múltiples capas, con un área completamente hidro-activa que consta de una membrana de poliuretano suave y absorbente, y de una película de poliuretano transpirable que es permeable al agua e impermeable a las bacterias. Esto permite que el exceso de vapor de agua se evapore, mientras protege el área de la herida de contaminación externa, manteniendo la herida húmeda y logrando un óptimo medio ambiente para el proceso de curación. Indicaciones: úlceras de presión de grado I-IV, heridas postoperatorias, lesiones vasculares, quemaduras de primero y segundo grado, lesiones con piel delicada contigua y sitios de donación de piel.



Exudado moderado



Exudado intenso



Hipoalergénico



Libre de látex

n°. artículo tamaño contenido empaque código de barra

n°. artículo	tamaño	contenido	empaque	código de barra
892910	cm 10 x 10	5 pz.	10	8 057681 905430
893010	cm 10 x 10	10 pz.	10	8 057681 905447
893015	cm 15 x 15	5 pz.	10	8 057681 905454
893020	cm 20 x 20	3 pz.	10	8 057681 905461

Beneficios:

- Rápida absorción del 90% o más de los exudados de la herida bajo compresión.
- Alta permeabilidad al vapor de agua 5000gms/m²/24 hrs.
- Cubierta de una película de espuma de poliuretano laminado, resistente al agua, permeable a gases y vapor de agua.
- Euroderm foam atrapa los detritos celulares y materiales proteicos en los poros de su superficie de contacto con la herida.
- Euroderm foam mantiene un medio ambiente húmedo y tibio en la superficie de la herida, que induce la formación de tejido de granulación y epitelización. Además, estas condiciones favorecen el auto desbridamiento de la herida.

Indicaciones:

- Euroderm foam se utiliza para heridas de mucho exudado, úlceras en las piernas, úlceras de presión, úlceras de diabetes, quemaduras de segundo grado y heridas traumáticas.

Contraindicaciones:

- Euroderm foam no se debe aplicar sobre heridas con costra seca o tejido necrótico duro, hasta que esto sea eliminado quirúrgicamente.
- Euroderm foam no debe ser utilizado en el tratamiento de heridas infectadas ni heridas que se extiendan hacia músculos, huesos o tendones.

Desempeño:


- El parámetro clave de rendimiento para las preparaciones de espuma es la capacidad de absorber altos niveles de exudado mientras mantiene un ambiente húmedo de la herida.

Características

Buenas propiedades de donación. Alta viscosidad.


Beneficios

Desbridamiento auto lítico que facilita la cicatrización más rápida. Minimiza la necesidad de desbridamiento físico. Fácil de aplicar: permanece in situ.

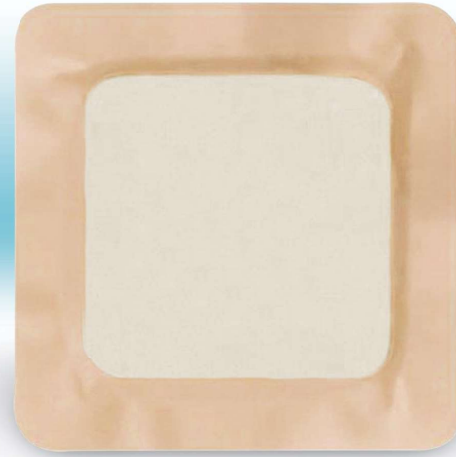

Euroderm foam plus

Compresa de espuma de poliuretano hidro-celular multicapa, combinado con un borde adhesivo que otorga una fijación efectiva, incluso en áreas de difícil acceso. Consiste en una capa superior de adhesivo de poliuretano hipoalergénico semipermeable, y una compresa de espuma suave altamente absorbente. Los fluidos son uniformemente distribuidos en la espuma de la compresa que, por lo tanto, se adapta perfectamente al lecho de la herida manteniéndola húmeda y en un óptimo medio ambiente para el proceso de curación.

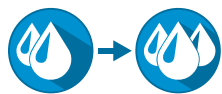

Exudado moderado

Exudado intenso



Hipoalergénico



Libre de látex

n°. artículo	tamaño	contenido	empaque	código de barra
893110	cm 10 x 10	10 pz.	5	8 057681 905492
893115	cm 15 x 15	5 pz.	5	8 057681 905508
893120	cm 20 x 20	3 pz.	5	8 057681 905515




Euroderm foam heel

Espuma de poliuretano hidro-celular multicapa, para el manejo de heridas en el talón o en cualquier área anatómica similar. Euroderm foam heel es no-adhesiva. Esto permite una eliminación libre de dolor del apósito, causando mínima aflicción para el paciente, incluso en los tejidos frágiles.

La alta absorción de la espuma proporciona una gestión de líquido superior por un período más largo de tiempo.

Euroderm foam heel está indicado para úlceras del pie diabético, úlceras de presión etapa I- IV, prevención de úlceras por presión en pacientes con capacidad parcial de movimiento.

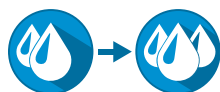

Exudado moderado

Exudado intenso



Hipoalergénico



Libre de látex

nº. artículo tamaño contenido empaque código de barra


893060

cm 12 x 13

3 pz.

5




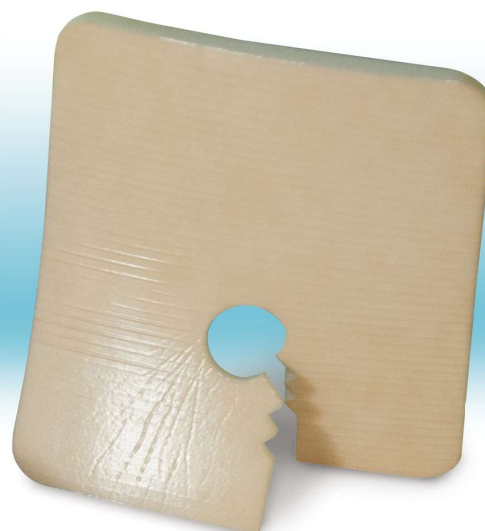

Euroderm foam tracheo

Euroderm foam tracheo es un dispositivo de espuma de poliuretano hidro-celular, abierto tipo "Ojo de cerradura". Compuesta de una espuma de poliuretano suave, altamente absorbente y de una película de poliuretano transpirable, que es impermeable al agua, a las bacterias y permeable al vapor. Los fluidos se distribuyen uniformemente en la espuma, por lo tanto, se adapta perfectamente a la traqueostomía o tubo de drenaje, asegurando el máximo confort al paciente.

La alta absorción del apósito de espuma proporciona una gestión de fluidos superior para un período más largo de tiempo. Euroderm foam tracheo está indicado para la gestión de fluidos alrededor de traqueostomía y sitios de drenaje.

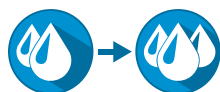

Exudado moderado

Exudado intenso



Hipoalergénico



Libre de látex

nº. artículo tamaño contenido empaque código de barra

893040

cm 8,5 x 8,5

10 pz.

5




893035

cm 6,5 x 6,5

10 pz.


5



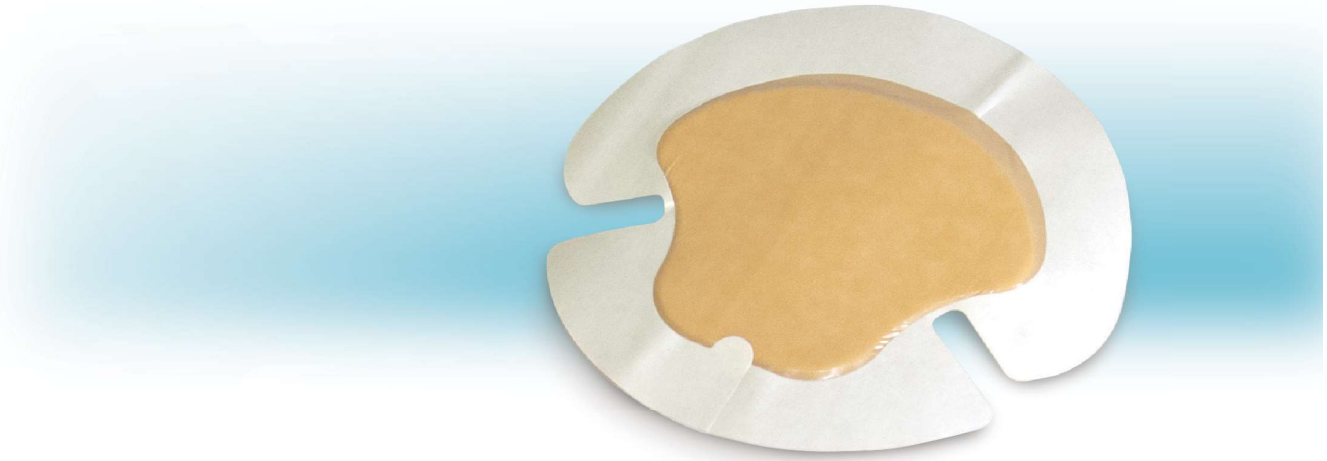

Euroderm foam plus concave

Espuma de poliuretano hidro-celular multicapa con forma cóncava y borde adhesivo, con la ventaja de un diseño anatómico adecuado para el manejo de heridas en el talón o cualquier área anatómica similar. Proporciona una gestión de líquido superior por un período más largo de tiempo. Euroderm foam concave está indicado para úlceras de pie diabético, úlceras por presión etapas I-IV, prevención de úlceras por presión en pacientes con capacidad parcial de movimiento, heridas quirúrgicas, quemaduras de 1º y 2º grado, sitios de donación de piel.

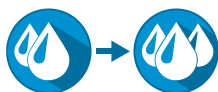

Exudado moderado

Exudado intenso



Hipoalergénico



Libre de látex

nº. artículo tamaño contenido empaque código de barra

893140

cm 18 x 16,5

3 pz.


5



8 057681 905522

Euroderm foam plus sacral

Espuma de poliuretano hidro-celular multicapa, formado con borde adhesivo y la ventaja de un diseño anatómico adecuado para el área sacra. Consiste en una capa superior hipoalergénica semipermeable de poliuretano adhesivo, y una suave compresa de espuma altamente absorbente. Euroderm foam plus sacral es muy adecuado para las heridas de la zona sacra donde se recomienda una cubierta impermeable. El grueso de la espuma asegura un efecto de amortiguación. Euroderm foam plus sacral reduce la presión sobre el área de la herida, reduciendo fricción y tensiones, brindando excelente comodidad y protección para el paciente. Está indicado para úlceras por presión del área sacra, úlceras por presión etapas I-IV, heridas quirúrgicas, quemaduras de 1º y 2º grado, sitios de donación de piel.

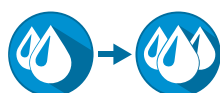

Exudado moderado



Exudado intenso



Hipoalergénico



Libre de látex

nº. artículo tamaño contenido empaque código de barra

893150

cm 22 x 22

3 pz.

5




8 057681 905539



Euroderm foam silicone nuevo

Euroderm foam silicone es un apósito altamente absorbente de espuma de poliuretano, posee una capa de gel de silicona perforada que entra contacto con la herida. El apósito no se adhiere al lecho de la herida, minimizando la interrupción de la curación del tejido. Está indicado para el tratamiento de heridas de exudación moderada a intensa y de espesor parcial y total, incluyendo:

- Apto para uso sobre la piel frágil.
- Úlceras por presión etapas I - IV, neuropatía (diabético), úlceras venosas y arteriales de pierna.
- Úlceras de pie diabético.
- Apto para uso con compresión.
- Quemaduras de primero y segundo grado.
- Desgarros de piel.
- Heridas quirúrgicas.
- Sitios de donación de piel.

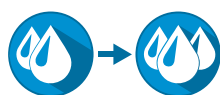

Exudado moderado



Exudado intenso



Hipoalergénico



Libre de látex

nº. artículo	tamaño	contenido	empaque	código de barra
893310	cm 10 x 10	10 pz.	10	8 057018 291205
893315	cm 15 x 15	5 pz.	10	8 057018 291212
893320	cm 20 x 20	3 pz.	10	8 057018 291229




Euroderm foam cavity nuevo

Apósito de espuma de poliuretano estéril no adhesivo, compuesto por una superficie hidro-activa. Es altamente absorbente para nivel medio o de alto exudado. Euroderm foam cavity se ajusta perfectamente a la cavidad de la herida y a la parte anatómica del cuerpo con excelente confort para el paciente, sin adherirse a la superficie de la herida. El producto tiene una buena adaptabilidad y suavidad. Además, el grueso de la espuma crea el efecto amortiguación que reduce la presión en la lesión y evita la fricción.

Euroderm foam cavity es libre de látex.
Indicado para:

- Tratamiento de heridas de cavidad.
- Sitios de donación de piel.
- Úlceras de presión.
- Heridas por eliminación de fistulas y abscesos.
- Úlceras venosas.

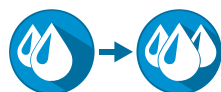

Exudado moderado

Exudado intenso



Hipoalergénico



Libre de látex

nº. artículo tamaño contenido empaque código de barra

893205

Ø cm 5

10 pz.

10



8 057681 908998

893207

Ø cm 7,5

3 pz.

10



8 057018 290222

893210


Ø cm 10

5 pz.

10



8 057681 909001

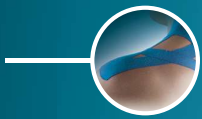

Línea Deportiva

Euroathletic® KLS
Euroathletic sport tape
Eurosave

Los grandes atletas se curan así



nuevo

Euroathletic® KLS Cinta deportiva Kinesio-Linfático



Vendaje elástico adhesivo para la kinesioterapia, para el tratamiento y prevención natural de trauma e inflamación muscular y articular.

Alivia el dolor. Corrige funciones musculares y articulares. Promueve la circulación linfática. Ayuda a la rehabilitación. Trata hinchazón menor y hematomas subcutáneos.

n.º artículo tamaño contenido empaque código de barra

520325 blue m 5 x cm 5 1 pz.

24



8

057018 291489

520355 pink m 5 x cm 5 1 pz.

24



8

057018 291519

520335 black m 5 x cm 5 1 pz.

24



8

057018 291496

520305 skin m 5 x cm 5 1 pz.

24



8

057018 291458

Euroathletic sport tape

nuevo

Cinta para sujeción rígida, vendaje funcional y deportivo, 100% viscosa con adhesivo hipoalergénico de óxido de zinc. Proporciona estabilización fuerte y eficiente de estructuras articulares.

Se puede cortar con la mano para una rápida y fácil aplicación. Indicado para vendaje funcional de los ligamentos musculares y lesiones de las articulaciones.



Libre de látex



Ideal para todos los deportes

nº. artículo tamaño contenido empaque código de barra

856023 m 10 x cm 3,8 1 pz. 12



856035 m 14 x cm 5 1 pz. 12





nº. artículo	tamaño	contenido	empaque	código de barra
746032	m 10 x cm 2,5	24 pz.	2	8 057018 291298
746033	m 10 x cm 3,8	18 pz.	2	8 057018 291304
746035	m 10 x cm 5	12 pz.	2	8 057018 291311
746036	m 14 x cm 2,5	48 pz.	2	8 057018 291328
746037	m 14 x cm 3,8	32 pz.	2	8 057018 291335
746038	m 14 x cm 5	24 pz.	2	8 057018 291342
746039	m 20 x cm 2,5	30 pz.	2	8 057018 291359
746040	m 20 x cm 3,8	20 pz.	2	8 057018 291366
746041	m 20 x cm 5	15 pz.	2	8 057018 291373

Eurosave underwrap

Vendaje de espuma de poliuretano elástico fino, resistente y altamente poroso. Eurosave es la mejor solución para la máxima comodidad de los atletas, para ser utilizado bajo Euroathletic KLS, Euroathletic sport tape o productos similares, por su comodidad y remoción sin dolor durante la competencia.



Libre de látex

nº. artículo	tamaño	contenido	empaque	código de barra
814002	m 27 x cm 7	1 pz.	48	8 057681 908073



Vendas

Eurelasto L
Eurelasto
Eurelasto F
Eurozinc
Eurozinc elast
Eurozinc alginate
Eurozinc bielast
Flebimed short
Flebimed medium
Flebimed strong
Flebimed bielast
Eurobandage
Eurocollar



Vendas

Eurelasto L

Venda elástica cohesiva de algodón, nylon y viscosa. Adecuado para aplicaciones en partes difíciles del cuerpo, evitando el uso de clips. Se adhiere a sí mismo, pero no a la piel u otras telas.



nº. artículo	tamaño	contenido	empaques	código de barra
516004	m 4 x cm 4	1 pz.	12	8 059616 061143
516006	m 4 x cm 6	1 pz.	12	8 059616 061150
516008	m 4 x cm 8	1 pz.	12	8 059616 061167
516010	m 4 x cm 10	1 pz.	12	8 059616 061174
516012	m 4 x cm 12	1 pz.	12	8 059616 061181
516104	m 20 x cm 4	1 pz.	1	8 059616 061198
516106	m 20 x cm 6	1 pz.	1	8 059616 061204
516108	m 20 x cm 8	1 pz.	1	8 059616 061211
516110	m 20 x cm 10	1 pz.	1	8 059616 061228
516112	m 20 x cm 12	1 pz.	1	8 059616 061235



Suave



Adaptable y maleable

Eurelasto



Vendaje elástico adhesivo 100% algodón blanco, con una guía de color a lo largo del medio. Recubiertos con resinas naturales y adhesivo hipoalergénico de óxido de zinc. Especialmente adecuado como vendaje compresivo para el tratamiento de enfermedades vasculares y en la profilaxis de la trombosis. Se utiliza como soporte y vendaje de alivio en caso de lesiones musculares y tendinosas, torsiones, luxaciones y esguinces.

n.º artículo tamaño contenido empaque código de barra

n.º artículo	tamaño	contenido	empaque	código de barra
508006	mt 4,5 x cm 6	1 pz.	16	8 059616 060474
508008	mt 4,5 x cm 8	1 pz.	16	8 059616 060481
508010	mt 4,5 x cm 10	1 pz.	16	8 059616 060498

Libre de látex



Suave



Adaptable y maleable



Eurelasto F



Vendaje elástico de 100% algodón blanco extra fuerte, con una guía de color a lo largo del medio. Recubierto con resinas naturales y adhesivo hipoalergénico de óxido de zinc. Especialmente adecuado como vendaje compresivo para el tratamiento de enfermedades vasculares y en la profilaxis de trombosis.

Se utiliza como soporte y vendaje de alivio en caso de lesiones musculares y tendinosas, torsiones, luxaciones y esguinces.

Especialmente diseñado para deportes de contacto (rugby, artes marciales).

n.º artículo tamaño contenido empaque código de barra

n.º artículo	tamaño	contenido	empaque	código de barra
508018	mt 4,5 x cm 8	1 pz.	16	8 057681 909032

Libre de látex



Suave



Adaptable y maleable



Eurozinc

Vendaje rígido con ungüento de óxido de zinc, con una fuerte acción antiinflamatoria. Adecuado para el tratamiento de las úlceras de la pierna causada por insuficiencia venosa (varices, síndrome postflebitis y edema venoso) y para el tratamiento de esguinces después de retirar el yeso.



nº. artículo	tamaño	contenido	empaque	código de barra
507005	mt 5 x cm 10	1 pcs.	10	8 059616 060436
507007	mt 7 x cm 10	1 pcs.	10	8 059616 060443
507010	mt 10 x cm 10	1 pcs.	10	8 059616 060450



Eurozinc elast

Vendaje elástico con ungüento de óxido de zinc, con una fuerte acción antiinflamatoria. Adecuado para el tratamiento de las úlceras de la pierna causada por insuficiencia venosa (varices, síndrome postflebitis y edema venoso) y para el tratamiento de esguinces después de retirar el yeso.



nº. artículo	tamaño	contenido	empaque	código de barra
506005	mt 5 x cm 10	1 pz.	10	8 059616 060405
506007	mt 7 x cm 10	1 pz.	10	8 059616 060412
506010	mt 10 x cm 10	1 pz.	10	8 059616 060429



nuevo

Eurozincalginate



Eurozinc alginate es una venda semirrígida con alginato de calcio y ungüento de óxido de zinc. Refrescante y flexible. Útil para el tratamiento de la fase aguda de lesiones en las articulaciones, músculos, ligamentos y tendones.

Muy fácil de aplicar y adaptable a cada tipo de cuerpo.

Eurozinc alginate también está indicado para el tratamiento de las úlceras de la pierna causada por la insuficiencia venosa (varices, síndrome postflebitis y edema venoso) o como un vendaje de apoyo. Eurozinc alginate se indica también para primeros auxilios en lesiones deportivas. Las propiedades hidrocoloidales aseguran un efecto refrescante durante aproximadamente 4 horas. Una vez seco el vendaje, se puede aumentar el efecto de enfriamiento conservando el vendaje en el refrigerador.



Libre de látex

nº. artículo	tamaño	contenido	empaque	código de barra
506035	m 5 x cm 8	1 pz.	10	8 057681 909124
506027	m 7 x cm 10	1 pz.	10	8 057681 909117



nuevo

Eurozinc bielast



Eurozinc bielast es un vendaje medicado, elástico en ambas direcciones, a lo largo y ancho, listo para usar. Impregnado con ungüento de óxido de zinc, con extraordinarias propiedades antiinflamatorias. Es capaz de garantizar un ambiente húmedo y no se secará durante su uso. Fácil de aplicar y bien tolerado por la piel. Tiene un efecto refrescante en la piel después de la aplicación. Adaptable a cada tipo de cuerpo.

Indicado para el tratamiento de las úlceras en las extremidades inferiores causadas por insuficiencia venosa (varices, síndrome post flebitis y edema venoso). También comúnmente utilizado para el tratamiento de las torsiones o como vendaje de apoyo.

nº. artículo	tamaño	contenido	empaque	código de barra
506105	m 5 x cm 10	1 pz.	10	8 057018 290536
506107	m 7 x cm 10	1 pz.	10	8 057018 291601
506110	m 10 x cm 10	1 pz.	10	8 057018 290543



Libre de látex

Flebimed short

Venda de compresión de elasticidad corta (35%) no adhesivo.

Algodón 80% - nylon 20%. Se puede esterilizar y viene con clips. Color piel.

Para vendajes de soporte y ayuda en casos de contusiones, esguinces y dislocaciones; en casos de tendinopatía, para la inmovilización de las articulaciones, protección contra hematomas en caso de heridas musculares. También adecuado para los usos de Flebología (edema, linfedema, ulcus cruris, sistema varices sintomática).



nº. artículo tamaño contenido empaque código de barra

nº. artículo	tamaño	contenido	empaque	código de barra
527004	mt 5 x cm 4	1 pz.	10	8 057681 909216
527006	mt 5 x cm 6	1 pz.	10	8 057681 909223
527008	mt 5 x cm 8	1 pz.	10	8 057681 909230
527010	mt 5 x cm 10	1 pz.	10	8 057681 909247
527012	mt 5 x cm 12	1 pz.	10	8 057681 909254

Cómodo



Lavable



Flebimed media

Hecho de 100% algodón. Se puede esterilizar y viene con clips. Color piel.

Puede ser utilizado para el tratamiento de la insuficiencia venosa crónica, en los casos de venas varicosas primarias y secundarias, úlceras de pierna, edema, tromboflebitis y vaso-escleroterapia.



nº. artículo tamaño contenido empaque código de barra

nº. artículo	tamaño	contenido	empaque	código de barra
527106	mt 5 x cm 6	1 pz.	10	8 057681 909261
527108	mt 5 x cm 8	1 pz.	10	8 057681 909278
527110	mt 5 x cm 10	1 pz.	10	8 057681 909285
527112	mt 5 x cm 12	1 pz.	10	8 057681 909292

Cómodo



Lavable



Flebimed forte

Venda de compresión elástica no adhesiva con extra capacidad de estiramiento (170%), y fuerte compresión. 92% algodón, 8% poliuretano. Se puede esterilizar y viene con clips de sujeción. Color piel. Para ser utilizado como venda de compresión flebológica, para el tratamiento del sistema de varices sintomática, para la prevención y tratamiento en deportes, trauma relacionado con el trabajo, apoyo y alivio de esguinces, luxaciones, contusiones y fracturas leves.



nº. artículo	tamaño	contenido	empaque	código de barra
527206	mt 7 x cm 6	1 pz.	10	8 057681 909308
527208	mt 7 x cm 8	1 pz.	10	8 057681 909315
527210	mt 7 x cm 10	1 pz.	10	8 057681 909322
527212	mt 7 x cm 12	1 pz.	10	8 057681 909339

CÓMODO



LAVABLE



Flebimed bielast

Vendaje de compresión no adherente bi-elástico, con alta elasticidad: 160% longitudinalmente, 80% transversalmente. Algodón 70%, 19% nylon, 11% poliuretano. Se puede esterilizar, viene con clips de sujeción. Color piel. Para ser utilizado como venda de compresión, después de la cirugía, para el tratamiento del sistema de varices sintomático, para la prevención y tratamiento en los deportes, trauma relacionado con el trabajo, para apoyo y alivio de esguinces o luxaciones.



nº. artículo	tamaño	contenido	empaque	código de barra
527306	mt 7 x cm 6	1 pz.	10	8 057681 909346
527308	mt 7 x cm 8	1 pz.	10	8 057681 909353
527310	mt 7 x cm 10	1 pz.	10	8 057681 909360
527312	mt 7 x cm 12	1 pz.	10	8 057681 909377

CÓMODO



LAVABLE





Eurobandage

Vendaje elástico en poliéster y algodón, con clips de sujeción. Adecuado para uso como vendaje de compresión, para tratar el sistema de varices y trombosis, tratamiento y prevención, también para apoyo y alivio de esguinces, luxaciones, contusiones. Lavable, reutilizable y durable, incluso en presencia de aceites y ungüentos.

nº. artículo	tamaño	contenido	empaque	código de barra
519005	mt 4,5 x cm 5	1 pz.	12	8 059616 061310
519007	mt 4,5 x cm 7,5	1 pz.	12	8 059616 061327
519010	mt 4,5 x cm 10	1 pz.	12	8 059616 061334
519015	mt 4,5 x cm 15	1 pz.	12	8 059616 061341



Lavable

Eurocollar



Collarín cervical blando. Adecuado para los casos donde el movimiento incontrolado de las vértebras cervicales causan dolor. Para el trauma de colisión, rigidez de cuello de origen reumático y trauma deportivo.

nº. artículo	tamaño	contenido	empaque	código de barra
503002	small	1 pz.	10	8 059616 060290
503003	medium	1 pz.	10	8 059616 060306
503004	large	1 pz.	10	8 059616 060313



Libre de látex



Lavable

Leyenda del producto

Preparación de la herida

Heridas crónicas
 Heridas agudas
 Quemadura 1º grado
 Quemadura 2º grado
 Quemadura 3º grado
 Quemadura 4º grado
 Heridas infectadas

Vulnomed



- Solución salina estéril
- Previene la formación de bacterias.
- Sustancias bien conocidas con bajo potencial alergénico.
- Compatible con apósitos para heridas de uso común.
- La apertura no afecta la vida útil.











Eurodressing






- Absorción rápida
- Se puede usar para eliminar el exudado y el tejido necrótico.
- Se puede usar en lugar de una gasa simple.
- También se puede usar como la capa primaria de contacto con la herida, heridas que exudan más, si están respaldadas por un segundo apósito absorbente.















Heridas necróticas a fibrinosas




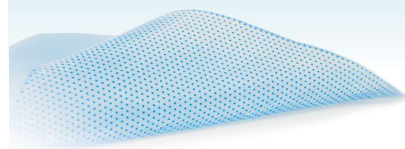

	Heridas necróticas secas	Heridas necróticas que exudan moderadamente	Heridas necróticas leves	
Hydromed Gel 	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p> → Cánula especial para alcanzar heridas profundas.</p> <p>→ Excelentes propiedades de hidratación.</p> <p>→ Cristal transparente para una evaluación precisa de la herida.</p> <p>→ Estabilidad excepcional; permanece en su lugar después de la aplicación.</p>
Eurosorb 	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<p> → Óptima adaptabilidad, absorberencia.</p> <p> → Absorción vertical.</p> <p>→ Sin maceración de los bordes de la herida.</p> <p>→ Sale en una sola pieza.</p> <p>→ Retiro de vendaje atraumático y sin dolor.</p>
Eurocell hydro 	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<p> → Óptima conformabilidad, absorberencia y formación de gel.</p> <p> → Absorción vertical.</p> <p>→ Sin maceración de los bordes de la herida.</p> <p>→ Sale en una sola pieza.</p> <p>→ Retiro de vendaje atraumático y sin dolor.</p>
Euroderm foam 	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<p> → Alta capacidad de absorción duradera.</p> <p>→ Alta retención.</p> <p>→ Se puede usar con terapia de compresión.</p> <p>→ Sin maceración de los bordes de la herida.</p> <p>→ Suave y flexible incluso cuando está saturado.</p>




 heridas de bajo exudado
 heridas con exudado moderado
 heridas muy exudadas

Heridas fibrinosas a granulantes



	Úlceras por presión	Úlceras arteriales y venosas de la pierna	Úlceras del pie diabético heridas quirúrgicas	Heridas quirúrgicas	Heridas traumáticas	Quemaduras de 2º grado	Traqueostomias / sitios de drenaje	
Euroderm foam 	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>  heridas de bajo exudado  heridas con exudado moderado  heridas muy exudadas </p> <p>  → Excelentes características de manejo de fluidos.  → Rentable: no necesita cambios frecuentes de apósito. → Suave y cómodo. → Bordes sellados: bajo riesgo de dejar marcas de presión. → Cambios de vendaje indoloros Atraumático. → Control visual de la absorción de exudado. </p>
Euroderm foam heel 	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>  → Listo para usar, no necesita dispositivo de fijación.  → Diseño anatómico e innovador que cubre el maléolo. → Espuma liberadora de presión: ayuda a prevenir úlceras por presión etapa I. → Buena protección contra la fricción y el esfuerzo cortante. </p>
Euroderm foam tracheo 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<p>  → Abertura precortada para adaptarse perfectamente a las traqueostomias y sitios de drenaje.  → Se puede usar cerca de cualquier cánula o estoma. </p>




Granulando para epitelizar heridas

	Úlceras por presión	Úlceras arteriales y venosas de la pierna	Úlceras del pie diabético	Heridas quirúrgicas	Heridas traumáticas	Quemaduras de 2º grado Heridas agudas superficiales	Injerto de piel	
Euroderm foam plus concave 	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<ul style="list-style-type: none"> → Propiedades transpirantes rápidas. → Excelente manejo de fluidos. → Adhesión segura a la piel superior. → Fijación segura debido al borde adhesivo. → Retiro atraumático, sin dolor. → Suave y confortable
Euroderm foam plus 	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<ul style="list-style-type: none"> → Fácil de aplicar, no necesita fijación secundaria. → Fijación segura debido al borde adhesivo. → Adaptable a los contornos del cuerpo. → Permanece en su lugar durante la ducha.
Euroderm foam plus sacral 	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<ul style="list-style-type: none"> → Forma anatómica adaptada al área del sacro. → Buena protección contra las úlceras por presión y maceración. → Permanece en su lugar durante la ducha.
Hydromed 	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Tecnología hydrogel</p> <ul style="list-style-type: none"> → Capacidad de absorción fuerte y duradera. → Alta resistencia cohesiva del gel. → Menos residuos de apósito en el lecho de la herida. → Bajo riesgo de derretimiento del apósito y fugas. → Reduce los olores.
Euroderm plus 	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<ul style="list-style-type: none"> → Absorción eficiente del exudado residual. → Apósito fino que se adapta a cualquier contorno corporal. → Transparente, permite el control visual de la herida. → Fácil de aplicar. → Permanece en su lugar durante la ducha.





 heridas de bajo exudado
 heridas con exudado moderado
 heridas muy exudadas

Heridas infectadas

	Úlceras por presión	Úlceras arteriales y venosas de la pierna	Úlceras del pie diabético	Quemaduras de 2º grado	Sitios donantes	Injerto de piel	
Silvermed sb 	✓	✓	✓	✓	✓	✓	<p>Tecnología de iones de plata</p> <ul style="list-style-type: none"> → Apósito para heridas estéril y conformable. → Capa gruesa y absorbente hecha de rayón de viscosa no tejido, y una almohadilla central de iones de plata activada para bacterias y absorción de malos olores. → Activación autónoma de iones de plata. → Silvermed tiene una capacidad de absorción limitada: se puede usar solo en herida de bajo exudado, o en combinación con otros apósitos absorbentes. → Ideal para heridas con olores y de exudado moderado a intenso. → Absorción eficiente de olores. → Se puede cortar.
Silvermed 	✓	✓	✓	✓	✓	✓	<p>Tecnología de iones de plata</p> <ul style="list-style-type: none"> → Apósito para heridas estéril y conformable. → Capa gruesa y absorbente hecha de rayón de viscosa no tejido, y una almohadilla central de iones de plata activada para bacterias y absorción de malos olores. → Activación autónoma de iones de plata. → Silvermed tiene una capacidad de absorción limitada: se puede usar solo en herida de bajo exudado, o en combinación con otros apósitos absorbentes. → Ideal para heridas con olores y de exudado moderado a intenso. → Absorción eficiente de olores. → Se puede cortar.

-  heridas de bajo exudado
-  heridas con exudado moderado
-  heridas muy exudadas

Apósitos postoperatorios • Heridas menores

	Controla el microambiente de pequeñas quemaduras	Capa primaria de contacto con la herida	Respaldo por apósito secundario			
 <p>Eurodressing</p>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<p>→ Absorción rápida.</p> <p>→ Baja adherencia.</p> <p>→ Ideal para heridas exudadas.</p> <p>→ Se puede usar para eliminar el exudado y el tejido necrótico.</p> <p>→ Se puede usar en lugar de una gasa simple.</p> <p>→ También se puede usar como la capa de contacto primario de las heridas con altos exudados, si están respaldadas y cubiertas por un segundo apósito absorbente.</p>
 <p>Eurodressing metal</p>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<p>→ Absorción rápida.</p> <p>→ Baja adherencia.</p> <p>→ Ideal para heridas levemente exudadas donde se requiere efecto antibacteriano.</p> <p>→ También se puede usar como la capa de contacto primario de las heridas con altos exudados, si están respaldadas y cubiertas por un segundo apósito absorbente.</p>
 <p>Euromed</p>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<p>→ Baja absorberencia.</p> <p>→ Baja adherencia.</p> <p>→ Ideal para heridas levemente exudadas / cicatrices.</p> <p>→ Cortes de sangrado menores.</p> <p>→ Para ser utilizado como barrera mecánica.</p> <p>→ Para controlar el microambiente de la herida, úlcera de las partes bajas del cuerpo, quemaduras y abrasiones de la piel en general.</p>
 <p>Eurometal</p>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<p>→ Baja absorberencia.</p> <p>→ Baja adherencia.</p> <p>→ Ideal para heridas levemente exudadas / cicatrices.</p> <p>→ Cortes de sangrado menores.</p> <p>→ Para ser utilizado como barrera mecánica.</p> <p>→ Para controlar el microambiente de la herida, úlcera de las partes bajas del cuerpo, quemaduras y abrasiones de la piel en general.</p>

